

La table chirurgicale à bras

Développée il y a plus de 20 ans en partenariat avec le Centre de la Main de Nantes, notre Table à bras a été largement adoptée et validée par plus de 50 établissements en France et chez nos voisins.



Réf. TABLE CHIRURGICALE A BRAS + SUPPORT BRAS

N° Produit : OCE-TCB10060 + OCE-SPB15010

Ensemble depuis plus de 50 ans, organisons l'hôpital de demain.



Allie confort pour le patient et facilité d'intervention pour le chirurgien



Facilité d'entretien : Décontamination facile grâce à sa surface lisse



Positionnement précis et stable pour des interventions contrôlées



Polyvalent : Peut être utilisée dans différents types d'interventions chirurgicales



Conçues pour résister à une utilisation intensive et prolongée



Mobilité : Permet de la déplacer facilement et où vous le souhaitez



distribue la gamme




www.hmsante.com

La table chirurgicale à bras

Notre table chirurgicale à bras est un outil précis et flexible pour des interventions chirurgicales optimales. Avec son bras articulé, elle offre stabilité et accessibilité.

Garantie
2 ANS

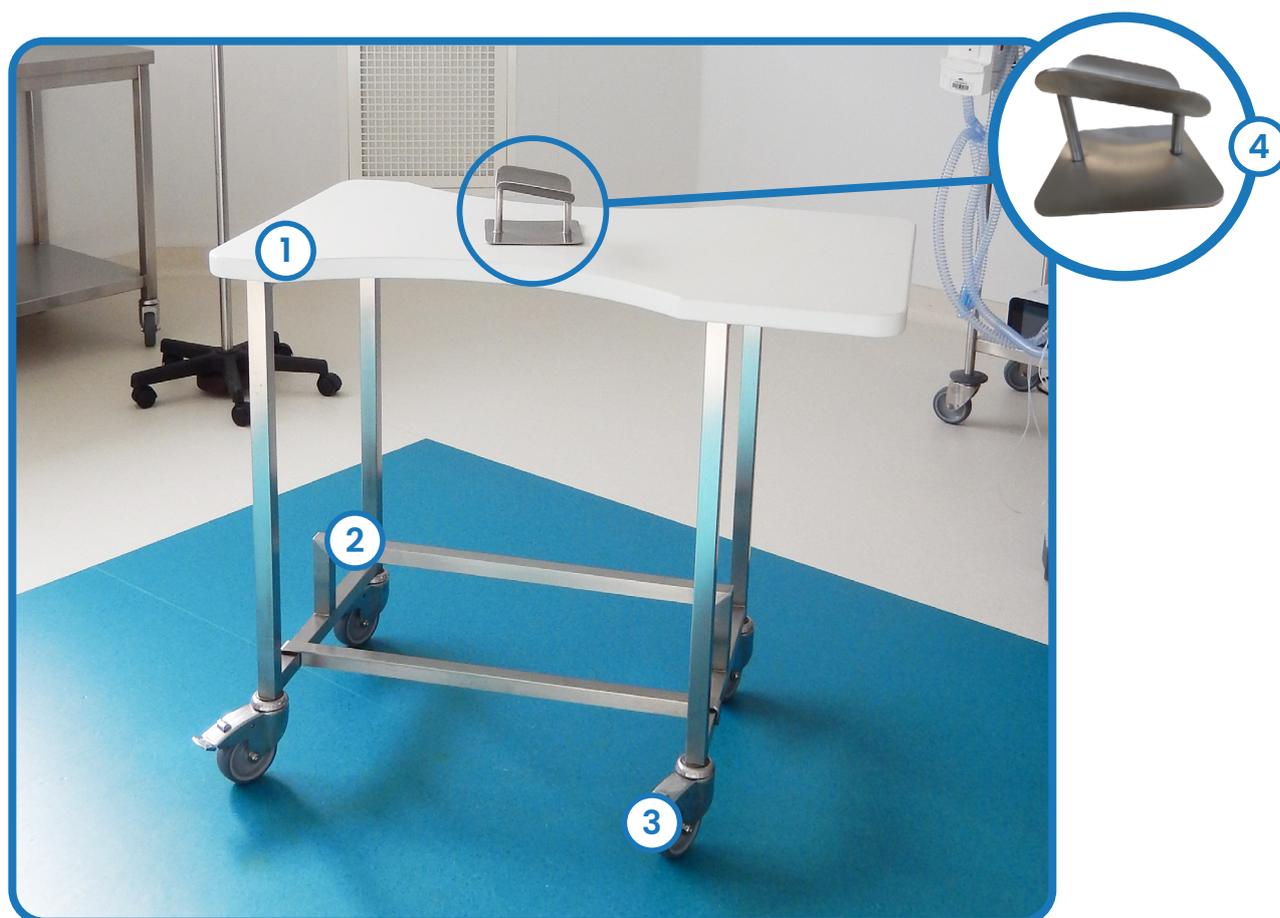

- ① Plateau échancré en matériau composite radio transparent
- ② Châssis Tubulaire en inox 304L
- ③ Roulettes à frein à bandage antistatique
- ④ Accessoire : Support bras en inox 304L

QUALITE




FABRIQUÉ EN
FRANCE
QUALITÉ PREMIUM

Champs d'application : orthopédie mains/bras et prélèvements sans l'accessoire «Support bras en inox 304L»

Caractéristiques techniques

Ses caractéristiques techniques vous offriront une précision inégalée et une expérience chirurgicale hors du commun.

La table

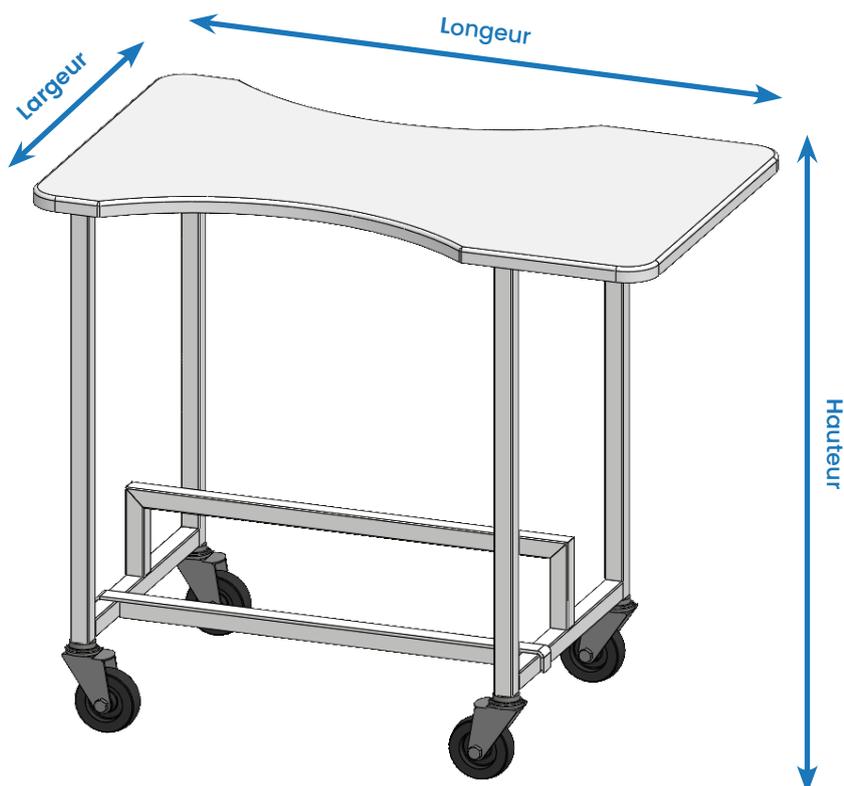

Dimensions :

Long. 1000 mm
Larg. 600 mm
Haut. 869.5 mm

Charge maximale :

60 Kg

Poids :

21 Kg

Le support bras



Dimensions :

Long. 150 mm
Larg. 150 mm
Haut. 100 mm

Poids :

1 Kg

La table chirurgicale est conçue en Solid Surface 100% acrylique, un matériau imputrescible, qui empêche la nidification des bactéries, non poreux à coeur, facilement réparable et facilement nettoyable.

- **Entretien quotidien :**

Utilisez votre **détergent habituel (dilué dans de l'eau)**, rincez avec de l'**eau chaude** et séchez avec un **chiffon sec**.

- **Dépôt de calcaire :**

Utilisez du "**VIKAL**" ou un **produit similaire** sur la zone concernée (laissez agir quelques minutes, puis rincez avec de l'eau chaude et un chiffon humide)

- **Objets brûlants :**

Ne posez jamais des contenants brûlants directement sur la surface

- **Taches spécifiques (rouille, encre, feutre, cirage) :**

Utilisez de l'**alcool à 90%**, du **trichloréthylène dilué**, de l'**alcool à brûler** ou un **dissolvant**. Rincez avec de l'**eau chaude** puis séchez avec un chiffon en coton blanc et propre.

- **En cas de salissure intense et non identifiée :**

Utilisez une **éponge "scotch Brite" standard** avec de la **crème à récurer abrasive**. Rincez à l'**eau tiède** et séchez.

- **Rayures :**

La résine "Solid Surface" est régénérable dans la masse, comme un parquet massif. Une intervention professionnelle qualifiée peut être réalisée pour éliminer les rayures et retrouver l'aspect initial.

www.hmsante.com

HM SANTE · 7, Avenue de la Résistance · Bât C 91700 Sainte Geneviève des Bois
Tel. +33 1 69 02 18 60 · Fax. +33 1 69 02 18 69
contact@hmsante.com